

Spritzflasche Weithals



Spritzflasche mit Mediumsaufdruck sowie Gefahren- und Sicherheitshinweise (H-Sätze/P-Sätze) nach GHS mit Substanzname in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, GHS-Piktogrammen und CAS-Nummer.


- ▶ Sicheres Befüllen durch Weithalsverschluss 39 mm (Hals-Ø innen)
- ▶ LDPE-gelbtransparent mit Lichtschutz
- ▶ Inhalt 500 ml



Spritzflasche Weithals

Aufdruck	Farbe	Preis €	Mengen-staffel ab	Staffel-preis €	Artikel-Nr.	
Neutral, ohne Aufdruck	gelb	100			0310-3050	N3
Destilliertes Wasser	transparent	100			0310-3051	N3
Methanol	grün	100			0310-3052	N3
Ethanol	orange	100			0310-3053	N3
Isopropanol	blau	100			0310-3054	N3
Aceton	rot	100			0310-3055	N3

Sicherheits-Spritzflasche

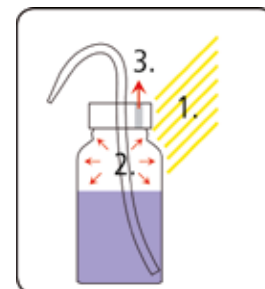

1. Temperaturanstieg
2. Innendruck steigt
3. Überdruck entweicht

Steigt die Raumtemperatur, oder scheint die Sonne ins Labor, tropfen herkömmliche Spritzflaschen durch den steigenden Innendruck. Durch das Entlüftungsventil kann der Überdruck entweichen und das Austropfen wird verhindert. Mit auslaufsicherem Entlüftungsventil, der Inhalt kann bei umgestürzten Flaschen nicht auslaufen wie bei Spritzflaschen mit Kugelventil oder Entlüftungsbohrung.

- ▶ Sicheres Befüllen durch Weithalsverschluss 39 mm (Hals-Ø innen)
- ▶ Dauerhafter Aufdruck nach GHS mit Substanzname in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch, GHS-Piktogrammen und CAS-Nummer
- ▶ LDPE-gelbtransparent mit Lichtschutz
- ▶ Inhalt 500 ml



Sicherheits-Spritzflasche

Aufdruck	Farbe	Preis €	Mengen-staffel ab	Staffel-preis €	Artikel-Nr.	
Neutral, ohne Aufdruck	gelb	12			0310-2056	N3
Destilliertes Wasser	transparent	12			0310-2050	N3
Methanol	grün	12			0310-2052	N3
Ethanol	orange	12			0310-2054	N3
Isopropanol	blau	12			0310-2055	N3
Aceton	rot	12			0310-2051	N3